

ALTIUS GRUPPEN

G5 MASSASJEAPPARAT



 40 00 70 08

 www.altiusgruppen.no

 info@altiusgruppen.no

G5 Fleximatic



Ikke la hendene dine begrense arbeidsdagen din !

G5 gir en unik terapautisk massasje og bløtvevs mobilisering.

Din trofaste
samarbeidspartner
siden 1966

Varenr: FLX24-SP

I pakken følger det med: G5 enhet med stativ, skuff og 4 hoder



AP212
Hode m/svamp
5 trekk inkl.




AP216
hode m/fire
gummi baller



AP227
hode m/en
gummi spiss



AP230
buet hode
m/svamp
5 trekk inkl.

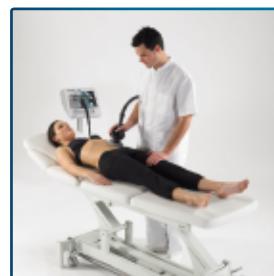

Lagerført tilbehør



Trekk



Bestillingsvare:



Upper & lower body manipulations



Hyperemia stimulation in the
Lumbar region / sacroiliac
Joint mobilization



Femoral block
Relaxation



Piriformis muscle relaxation /
toning of the gluteal
Muscles



Mechanical lymphatic
Drainage



Treatment of functional
Gastrointestinal conditions



Myofascial relaxation
Therapy on the
Gastrocnemius muscle



Lumbar vertebra relaxation



Patella mobilization



Foot arch friction



Reduction of
Post-operative adhesions



Vlf vibro-percussion of
The Achilles tendon




Ganglionic stimulation


Upper body manipulations




Neck pains
Treatment

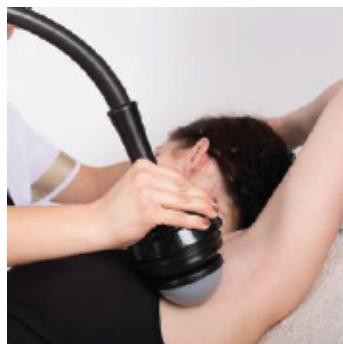

Subscapularis
Relaxation

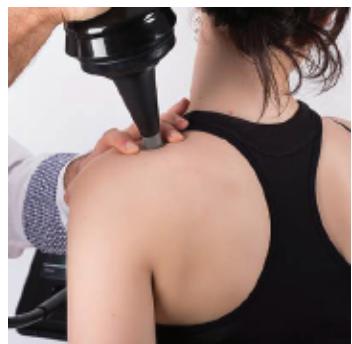

Vlf(1) cross vibro-percussion
On the supraspinatus

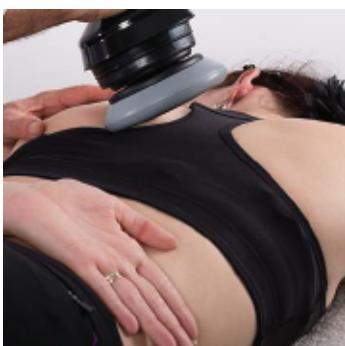

Scapula mobilization /
rhomboid relaxation



Intestinal transit
Reactivation




Paraspinal muscles
Relaxation




Trapezius relaxation



Soft tissue massage

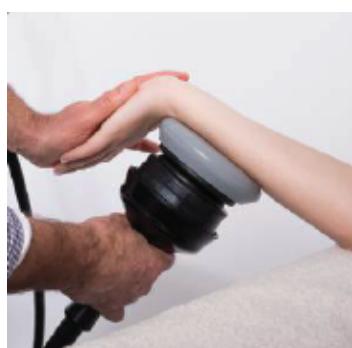


Carpal mobilization

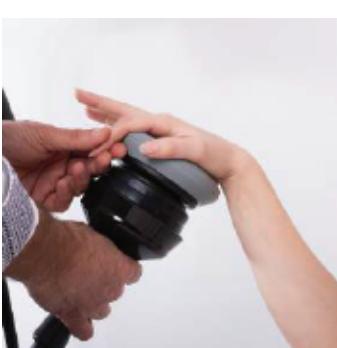

Joint capsule traction
(Arthritis treatment)



Vlf vibro-percussion for
Epicondylitis treatment

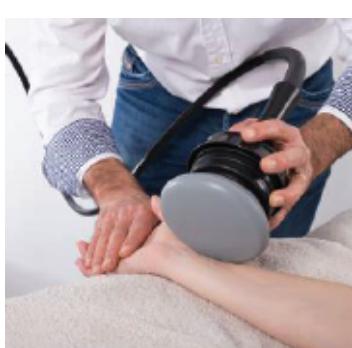

Carpal tunnel syndrome
Treatment

(1) Very Low Frequency

Product details

- 1 Analogic control system:
Start/stop - Speed control
from 0 to 60 Hz
- 2 Drive cable assembly
- 3 Complete massage head
- 4 G5® applicators screwing
system
- 5 Rolling caster stand with
accessory-storage tray
- 6 Heavy-duty 24V DC motor,
150W – 24V built-in power
universal supply



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Dimensions (LxDxH) | 54 x 54 x 112 cm

Weight | 11,5 kg

Input voltage | 100-240 V.

Frequency | 0-60 Hz

Conformity | CE 0459

Treatments & Contra-indications

REQUENCY	FUNCTION / ACTION LEVEL / INDICATION
Max. 10 Hz	Acute traumas Organs treatments (ex: bowels, colon...) Lymphatic drainage support
10 Hz - 30 Hz	Muscle relaxation (muscle spasms healing) General treatment of muscles – Relaxation of deep muscle groups Respiratory therapy (15-25 Hz) Preparation to high frequency treatments
20 Hz - Max. 30 Hz	Mechanical massage (sports medicine) Relaxation (periosteum, joint capsule, skin)
45 Hz - 50 Hz	Specific application over tendons & ligaments Joint mobilization Increase of vascular tonicity
45 Hz - 60 Hz	Friction Myofascial release therapy (trigger points) Soft tissue massage Preparation to manual techniques Pain-killing treatment Myofascial release points Increase of muscle toning (ex: in case of paralysis) Kidney stones mobilization Tissue stimulation

CONTRA INDICATIONS

Basic precautions must be taken when using the G5 medical devices, due to their vibration waves' deep penetration. An excessive and too long pressure on the skin must be avoided. They must be used with specific attention on sensitive zones such as the head, the neck and intern organs. The area around the eyes must be avoided.

The general contra-indications of G5 medical devices use as follows:

- Over a severe inflammation
- Over a hemorrhagic region
- Over skin lesions and malignant lesions
- In case of pregnancy (both therapist & patient) & during menstruation (if painful for the patient)
- In case of thrombosis
- In presence of pace-maker and/or on a patient with severe heart conditions
- On people allergic to vibrations

ALTIUS GRUPPEN

G5 MASSASJEAPPARAT

Gunstig leasing avtale gjennom Siemens Finans

Som kunde hos Altius Gruppen har du muligheten til å velge leie fra Siemens Finans som finansieringsalternativ på alle produkter og løsninger du skal investere i.

Eksempler på finansering:

Kjøpesum eks. mva.	Forskudd:	60 mnd	48 mnd	36 mnd	24 mnd
300.000,-	0 %	6.100,-	7.300,-	9.350,-	13.500,-
300.000,-	10 %	5.500,-	6.600,-	8.500,-	12.150,-
200.000,-	0 %	4.100,-	4.900,-	6.250,-	9.000,-
200.000,-	10 %	3.650,-	4.400,-	5.650,-	8.100,-
100.000,-	0 %	2.100,-	2.450,-	3.150,-	4.500,-
100.000,-	10 %	1.815,-	2.200,-	2.810,-	4.100,-
50.000,-	0 %	1.100,-	1.250,-	1.600,-	2.250,-
50.000,-	10 %	910,-	1.100,-	1.400,-	2.025,-

Alle priser oppgitt er eks. mva, frakt kommer i tillegg. Det tas forbehold om endelig kredittgodkjennelse av Nordea Finans som må foretas i hvert enkelt tilfelle.

 40 00 70 08

 www.altiusgruppen.no

 info@altiusgruppen.no